



APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом

Новый подход к фиксации брекетов

- ▶ Низкий коэффициент самопроизвольного дебондинга
- ▶ Экономит до 40% времени на установку брекетов
- ▶ Защищает эмаль зубов пациентов на протяжении всего лечения
- ▶ Легкое снятие брекетов и удаление остатков адгезива
- ▶ Не нужно удалять излишки адгезива


Брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free: Эффективная система установки брекетов.

Экономит время и деньги



- ▶ Время фиксации сокращено на 40%
- ▶ Простое и быстрое снятие брекетов и удаление остатков клея

Среднее время фиксации 1 брекета¹

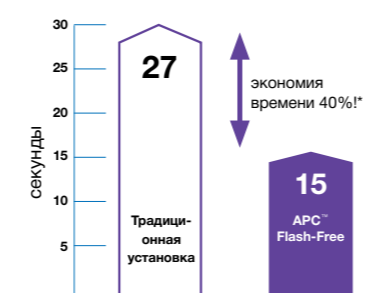


Время фиксации включает в себя установку, позиционирование и удаление излишков адгезива

Потрясающая эффективность фиксации



- ▶ Отсутствие этапа удаления излишков позволяет снизить риск нарушения позиционирования брекета
- ▶ Низкий коэффициент самопроизвольного дебондинга


Средний коэффициент дебондинга

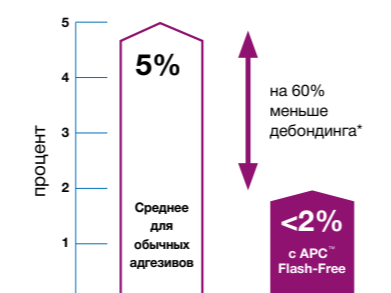

Защищает эмаль зубов



- ▶ APC Flash-Free герметично закрывает пространство под брекетом и до 2 мм по его периметру. В результате эмаль будет защищена от воздействия кислоты не только под брекетом, но и по его краям, куда часто забивается пища.

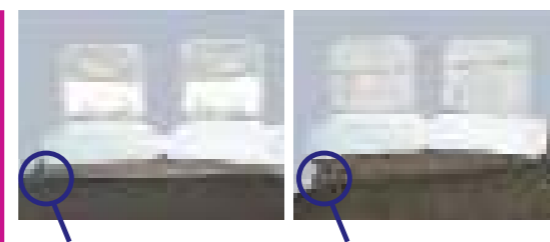

APC Flash-Free Гладкая база

Traditional Adhesive Шероховатая, неровная база адгезива из-за шага удаления остатков

Легкое снятие




- ▶ Брекеты Clarity Advanced и Clarity SL легко снимаются, не травмируя эмаль, благодаря концентратору напряжения - особой технологии компании 3M.



Как действует APC Flash-Free?

- ▶ Подложка из нетканого материала, пропитанная адгезивом, крепится к основанию брекета.
- ▶ В момент установки адгезив контролируемо растекается под брекетом и пропитывает нетканую подложку, не позволяющую клею выйти дальше двух миллиметров от края, запечатывая все поднутрения под площадкой брекета.
- ▶ Труднодоступные для очистки места – стык брекета и зуба – дополнительно защищены

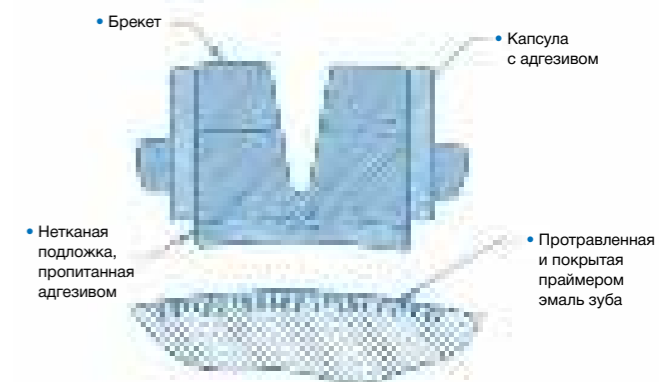

APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом



Созданный на основе научных достижений 3M, APC Flash-Free опирается на 3 высокотехнологичные платформы 3M - нанотехнологии, адгезивы и нетканые материалы. Именно они использовались для создания инновационного дизайна адгезивной подложки APC Flash-Free.



Простой и эффективный процесс фиксации.


1. Протравить и нанести праймер.



2. Просто установить брекет.



3. Полимеризовать и всё!

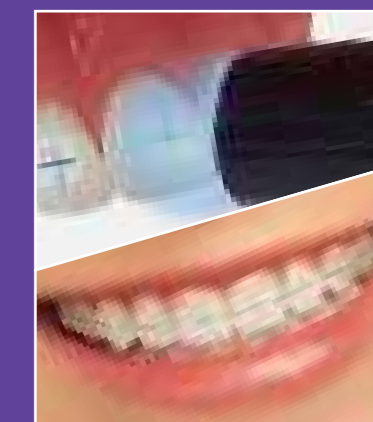

APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом

Теперь APC Flash-Free доступен в 4 видах продуктов, для полной установки 7x7.



Керамические брекететы Clarity SL: Эстетические брекететы со всеми преимуществами самолигирования.




Керамические брекететы Clarity Advanced: Эстетические низкопрофильные брекететы.



Металлические брекететы Victory Low Profile: лигатурные брекететы с низким профилем.



Металлические брекететы SmartClip SL3: Уникальные самолигирующие брекететы для эффективности лечения.

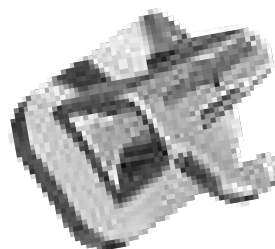

Замок-трубка Victory Series Superior Fit: оптимизированный дизайн обеспечивает отличное прилегание, удобство использования и эффективность лечения.

3M

Уполномоченный представитель на территории РФ АО «3М Россия»
108811, Москва, п. Московский, Киевское ш.,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный парк «Сомсити»
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
www.3Mespe.ru

Клиентский центр
620014, Екатеринбург
ул. Бориса Ельцина, 1а
БЦ «Президент», 11 этаж
Тел.: +7 (343) 228 22 88
Факс: +7 (343) 228 22 99

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Для медицинских работников.
Для распространения на профессиональных мероприятиях.
3М, логотип 3М, являются зарегистрированными товарными знаками компании «3М Компани».
© 3М 2019. Все права защищены.